



SVARSTYKLĒS

PW436, PW436-01, PW436-02

NAUDOJIMO VADOVAS


Dėkojame, kad pasirinkote mūsų elektronines vonios svarstykles. Prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją prieš naudodami gaminį pirmą kartą. Instrukcijas laikykite saugioje vietoje.

SPECIFIKACIJOS

- Įrengta itin tiksli apkrovos matuoklio jutiklių sistema
- Grūdinto saugaus stiklo / kaučiuko korpusas
- Keliamoji galia: 5kg ~ 180kg
- Padalos: 100g, 0,2lb.
- Automatinis įjungimas ir automatinis išjungimas
- Matavimo vienetai: kg/lb/st
- Automatinis nulio atstatymas
- Mažos galios ir perkrovos indikatorius
- Maitinimas: 1 x 3V CR2032 ličio baterija

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Padėkite svarstykles ant kieto lygaus paviršiaus (venkite kilimų ar bet kokių minkštų paviršių)
- 1 ŽINGSNIS. Prieš naudodami nuimkite izoliacinį tarpiklį nuo akumuliatoriaus kontaktų. LCD ekranas rodys  nuėmus izoliacinį lapelį.
- 2 ŽINGSNIS. Atsistokite ant svarstyklių, tolygiai uždėkite kojas ant svarstyklių nejudėdami ir palaukite, kol svarstyklės apskaičiuos svorį, jūsų tikslus svoris bus rodomas taip:

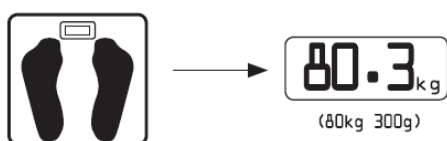

- 3 ŽINGSNIS. Nulipus nuo svarstyklių, jos automatiškai išsijungs.

PASTABA: Kai svarstyklės automatiškai išsijungia (izoliacinis lapelis buvo pašalintas), jums tereikia valdyti svarstyklės pagal 2 ir 3 ŽINGSNIUS.

VIENETŲ KONVERTAVIMAS

Paspauskite mygtuką „UNIT“, kad konvertuotumėte vienetus kg/lb/st. Mygtukas „UNIT“ yra svarstyklių gale (po baterijos dėžute su rodykle „set/unit“).


PERKROVOS INDIKATORIUS

- Kai svarstyklės yra perkrautos (daugiau nei 150 kg / 330 svarų / 24 akmenų), ekrane pasirodys: 

BATERIJŲ PAKEITIMO INDIKATORIUS

- Kai reikia pakeisti baterijas, ekrane pasirodys: 
- Atidarykite galinę svarstyklių plokštę, tada atsargiai išimkite baterijas iš

baterijų skyriaus, vadovaudamiesi pav.:

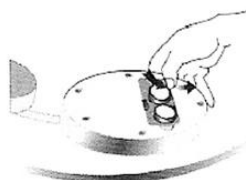

PRIEŽIŪRA IR PASTABOS

- Padėję svarstyklės ant kieto, lygaus paviršiaus užtikrinsite didžiausią tikslumą ir pakartojamumą.
- Visada sverkitės ant tų pačių svarstyklių, pastatytų ant to paties grindų paviršiaus. Nelygios grindys gali turėti įtakos rodmenims.
- Visada sverkitės be drabužių ar avalynės ir prieš valgį. Rytas yra yra geriausias laikas svėrimuisi.

- Jūsų svarstyklės suapvalinamos aukštyn arba žemyn iki artimiausio 100 g/0,2 svaro. Jei sveriatės du kartus ir gaunate du skirtingus rodmenis, jūsų svoris yra tarp dviejų rodmenų.
- Nuvalykite svarstyklės drėgna šluoste, bet neleiskite vandeniui patekti į svarstyklės. Nenaudokite jokių cheminių valymo priemonių.
- Neleiskite svarstyklėms permirkti vandenyje, nes galite sugadinti elektroniką.
- Išimkite baterijas, jei svarstyklių nenaudosite ilgą laiką
- Atsargiai elkitės su svarstyklėmis, tai tikslus prietaisas, nemėtykite jų ir nešokinėkite ant jų.
-

	Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jas, kad skatintumėte tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Jie gali paimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.
--	--